

Quick Reference Guide

Loading and Rinsing of the Kangaroo™ ePump Enteral Feeding Pump

Proper Loading and Unloading of Feeding Pump




Grasp thumb tab on valve and insert firmly into left pocket, ensure valve is fully seated. Tab should align with raised white line on left.



Grasp black ring retainer, gently wrap tubing around rotor and insert retainer directly into right pocket. **Do not overstretch tubing.**



To properly unload a pump set, power the pump off and wait 10 seconds before removing the feeding set.

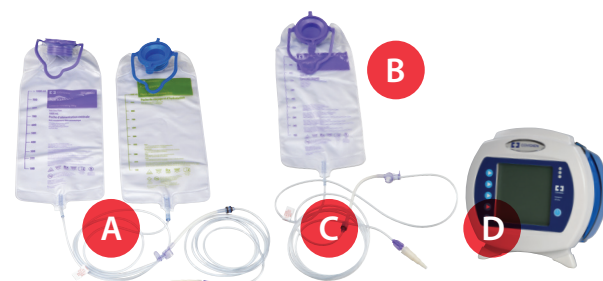

A. Feed and flush valve assembly
B. Feed only valve assembly
C. Distal end of feeding set
D. Pump

Proper Rinsing of Feeding Set



Disconnect feeding set from patient before rinsing. The feeding set must remain loaded during the rinsing procedure.



CAUTION – if set is removed from the pump while in operation, it may damage the set and prevent use, and will negatively impact the system accuracy.



Empty contents of feed bag.



Fill the feed bag with water to approximately half of the total capacity. Properly seal the bag and shake for 5 to 10 seconds.



Empty the feed bag and repeat the last step until the bag contains clean water.



Power the pump on. Select "Keep Settings" to continue with previous setting or "Clear Settings" to start programming new pump settings.




Press the "Prime Pump" button to enter the "Prime Pump" screen.



Press and hold the "Hold to Prime" button until only clean water flows through the tubing. Once the rotor starts this, it takes between 1 and 2 minutes.



Empty bag of water. Prime to remove any remaining water out of the feeding set.

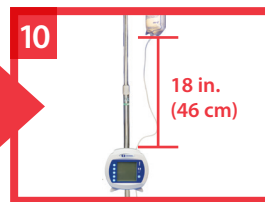

CAUTION – To achieve proper accuracy, the bottom of the feeding set bag must be 18 in. (46 cm) above the top of the feeding pump.

For additional operations and information, see the Operating Manual for the programmable Kangaroo™ ePump Enteral Feed and Flush pump.

Guide de référence rapide

Chargement et rinçage de la Kangaroo^{MC} ePump pompe d'alimentation entérale

Chargement et déchargement appropriés de la pompe




Saisir la valve par la languette et l'insérer fermement dans le logement de gauche. Appuyer sur la languette vers le bas pour s'assurer que la valve est bien en place. La languette doit être alignée avec la ligne surélevée à gauche.



Saisir l'anneau de retenue noir, passer délicatement la tubulure autour du rotor puis insérer l'anneau directement dans le logement de droite. **Éviter de trop étirer la tubulure.**



Pour décharger correctement une tubulure, mettre la pompe hors tension et attendre 10 secondes avant de retirer la tubulure d'alimentation.

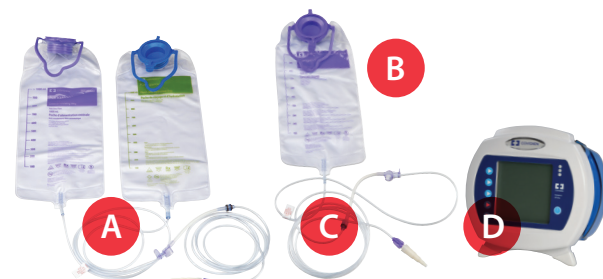

A. Ensemble d'alimentation et de rinçage

B. Ensemble de valve d'alimentation seulement

C. Extrémité distale de la tubulure d'alimentation

D. Pompe

Rinçage appropriés de la tubulure d'alimentation



Débrancher la tubulure d'alimentation du patient avant de procéder au rinçage. La tubulure d'alimentation doit rester chargée durant la procédure de rinçage.



ATTENTION – Le fait de retirer la tubulure de la pompe peut l'endommager et la rendre inutilisable et peut également affecter négativement la précision du système.



Vider le sac.



Remplir environ la moitié du sac d'eau. Sceller correctement le sac et agiter pendant 5 à 10 secondes.



Vider le sac d'alimentation et répéter la dernière étape jusqu'à ce que le sac contienne uniquement de l'eau claire.



Mettre la pompe sous tension. Sélectionner « Conserver paramètres » pour continuer d'utiliser les réglages précédents ou « Effacer paramètres » pour programmer de nouveaux réglages.




Appuyer sur « Amorcer pompe » pour accéder à l'écran d'amorçage de la pompe.



Appuyer sur « Maintenir pour amorcer rinç. » et tenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que de l'eau claire circule dans la tubulure. Une fois le rotor en marche, la procédure prend 1 à 2 minutes.



Vider le sac d'eau. Amorcer la pompe pour expulser tout résidu d'eau dans la tubulure.

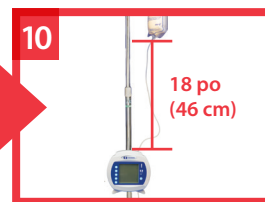

ATTENTION – Afin d'obtenir la précision désirée, le sac d'alimentation doit être placé 18 po (46 cm) au-dessus de la partie supérieure de la pompe d'alimentation.

Pour plus de fonctionnalités et d'information, consulter le Manuel d'utilisation de la pompe d'alimentation et de rinçage programmable Kangaroo^{MC} ePump.